



PERIPHERAL INTERVENTION

Merit PAK™

Kits de acceso pedio



Lo mejor
para la
recuperación
de las
extremidades


Kits de acceso pedio Merit PAK™

El acceso pedio es un prometedor punto de acceso alternativo para procedimientos de recanalización en pacientes con enfermedad arterial periférica (EAP) e isquemia crítica de las extremidades (ICE)¹. Merit Medical ha diseñado kits eficientes para ayudar a los médicos a lograr el acceso pedio: presentamos los kits de acceso pedio Merit PAK.

Acceso preciso

- **Agujas Ecogénicas** para más visibilidad en radioscopias y ultrasonidos
- **Agujas con conector transparente** para mejor visibilidad de los fluidos

Minikit de acceso pedio

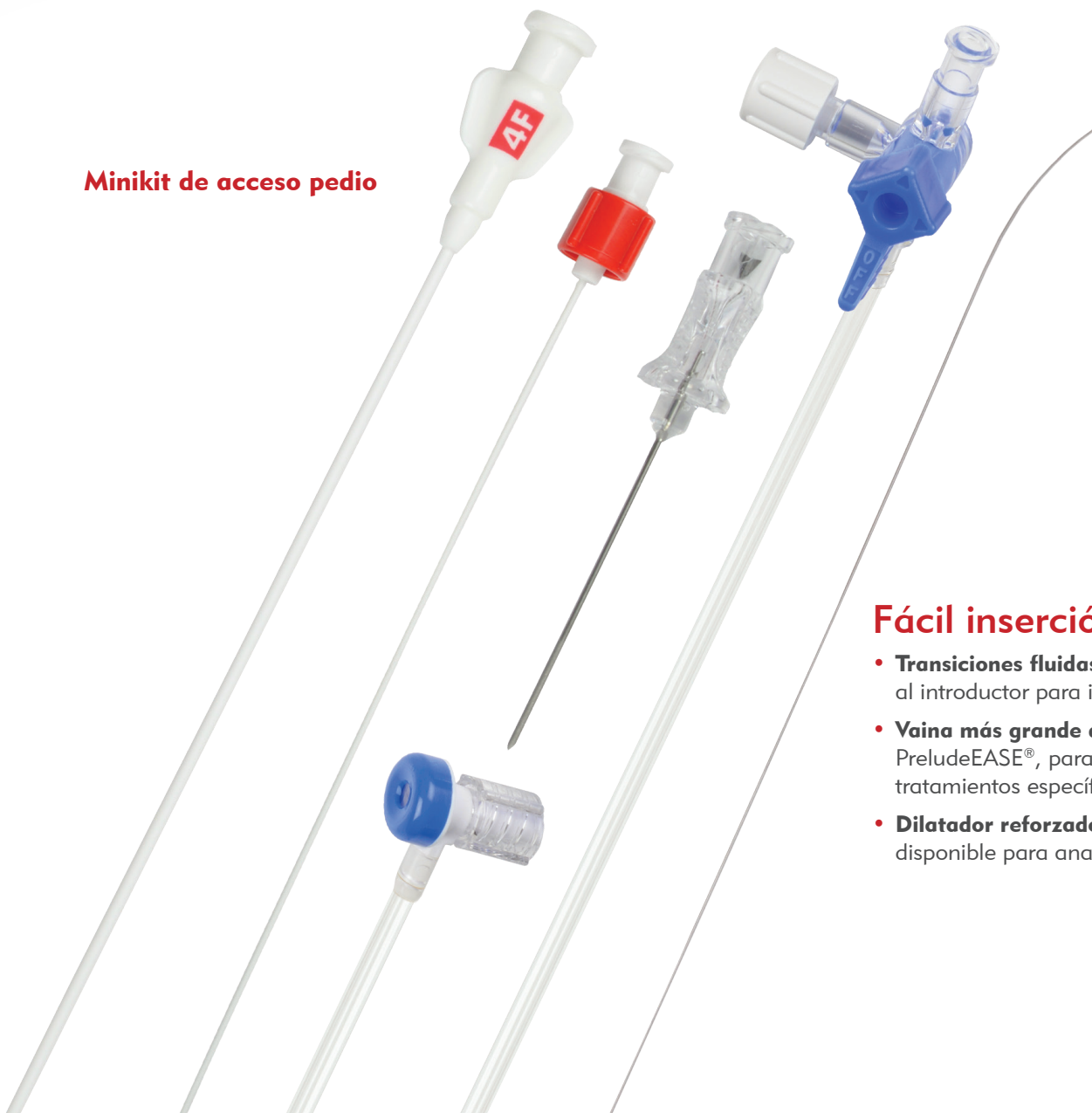

Fácil inserción


- **Transiciones fluidas** desde el dilatador al introductor para inserciones más suaves
- **Vaina más grande de 4F (DI)** e hidrófila PreludeEASE®, para introducir productos de tratamientos específicos
- **Dilatador reforzado** disponible para anatomía complicada

Merit PAK™ es un conjunto de kits de acceso pedio con todo lo necesario para acceder a las arterias por debajo de las rodillas. Las microagujas, los introductores y los dilatadores permiten un acceso rápido y sencillo en procedimientos de rescate de extremidades.



Kit de acceso pedio hidrófilo


Colocación y hemostasia

- **La guía con núcleo superelástico de Nitinol** aumenta la flexibilidad y la resistencia a acodamientos²
 - **Adaptador de la válvula de hemostasia** para gestionar la inyección, la aspiración y la hemostasia
- 

Kits de acceso pedio Merit PAK™


INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

N.º de catálogo	Tipo	Tamaño introductor	Longitud operativa de vaina	Calibre de aguja	Longitud de aguja	Tipo y conector de aguja	Diámetro de guía	Longitud de guía	Válvula de hemostasia
PAKM4NPD4	Mini	4/3F	10 cm	21	4 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí
PAKM4NPD7	Mini	4/3F	10 cm	21	7 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí
PAKM5NPD4	Mini	5/3F	10 cm	21	4 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí
PAKM5NPD7	Mini	5/3F	10 cm	21	7 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí
PAKS4NPD4	Endurecido	4/3F	10 cm	21	4 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí
PAKS4NPD7	Endurecido	4/3F	10 cm	21	7 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí
PAKS5NPD4	Endurecido	5/3F	10 cm	21	4 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí
PAKS5NPD7	Endurecido	5/3F	10 cm	21	7 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí
PAKPHR47NPD4	Hidrófilo	6/4F	7 cm	21	4 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí
PAKPHR47NPD7	Hidrófilo	6/4F	7 cm	21	7 cm	Transparente/Eco	0,018"	40 cm	Sí

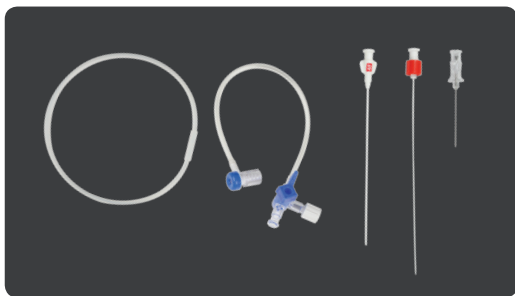

MINIKIT DE ACCESO PEDIO

- Aguja ecogénica con conector transparente
- Introductor y dilatador
- Guía de Nitinol/Paladio (NPD)
- Adaptador de válvula de hemostasia

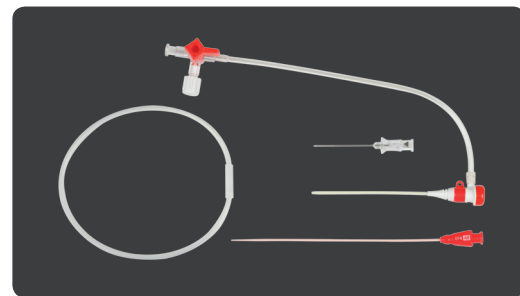

KIT DE ACCESO PEDIO HIDRÓFILO

- Aguja ecogénica con conector transparente
- Introductor por vaina hidrófila con válvula de hemostasia y brazo lateral
- Guía de Nitinol/Paladio (NPD)

KIT DE ACCESO PEDIO REFORZADO

- Aguja ecogénica con conector transparente
- Introductor y dilatador reforzados
- Guía de Nitinol/Paladio (NPD)
- Adaptador de válvula de hemostasia

¹ El-Sayed H.F. Retrograde Pedal/Tibial Artery Access for Treatment of Infragenicular Arterial Occlusive Disease. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2013 abril-junio; 9(2): 73-78.

² Stockel D. Nitinol – Material with Unusual Properties. Endovascular Update, Issue 1. 1998

Para un inventario completo, visite nuestra web o hable con su profesional de Merit Medical.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.208.4300
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

MeritEMEA.com

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 22 518 02 30
(Français)
+41 22 518 02 52
(Italiano)
+41 22 518 00 35
UK
0800 973 115